


## Indicateur de température pour poche de sang HemoTemp® II

L'HemoTemp® II est constitué de deux éléments complémentaires : un indicateur irréversible de température du sang à cristaux liquides et un thermomètre réversible à cristaux liquides pour le transport et le stockage des poches de sang en dehors de la banque de sang.

Cet indicateur visuel est spécialement conçu pour afficher à la fois la température active et l'enregistrement continu des températures inacceptables. Si la couleur bleue de la fleur s'estompe lorsque la température est supérieure ou égale à 10 °C, elle ne réapparaîtra pas si vous refroidissez la poche.

- La partie réversible de l'HemoTemp® II fait office de thermomètre pour la poche de sang.
- La partie irréversible, la « fleur », signale lorsque la température centrale du sang a dépassé 10 °C.

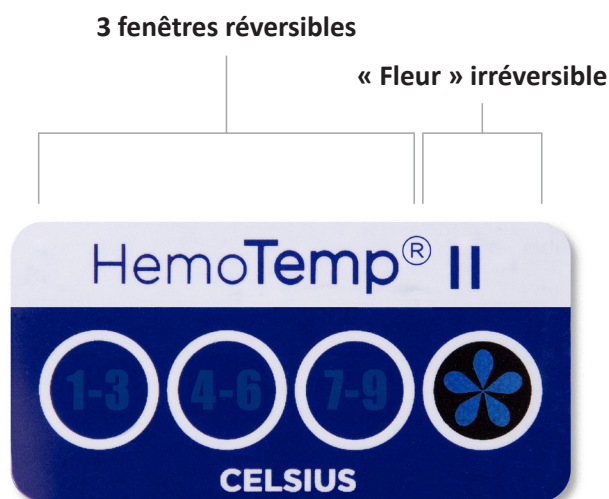

### Avantages

- Les fenêtres affichent l'évolution de la température afin de vous indiquer clairement l'état de la poche.
- Le changement de couleur irréversible de la fleur indique que le sang a atteint une température trop élevée même s'il vient à être refroidi.
- Les indicateurs ne nécessitent pas de stockage au froid. Il suffit de les coller et de les activer.
- Il s'agit d'une manière économe de respecter les normes de qualité et réglementaires.

### Caractéristiques principales

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Seuil de température   | 10 °C (50° F) |
| Précision              | ± 0,5° C      |
| Durée d'utilisation    | 18 mois       |
| Conditions de stockage | 20-30 °C      |

## Indicateur de température pour poche de sang HemoTemp® II

### Facile à utiliser, précis et fiable

- 1) **Activation** : placez l'indicateur dans l'activateur pendant 60 secondes. Retirez l'indicateur de l'activateur et attendez que la fleur commence à devenir bleue. Lorsqu'elle le devient, elle est prête à être placée sur la poche.



- 2) **Collage de l'indicateur sur la poche de sang** : retirez la pellicule de protection de l'HemoTemp II et collez l'indicateur au centre de la poche de sang réfrigérée ou vers le bas de celle-ci.



- 3) **Lecture facile** : les fenêtres réversibles affichent la température actuelle de la poche de sang.

- 4) La fenêtre irréversible (la fleur) devient beige/brune dès que la poche de sang dépasse 10 °C, quelle que soit la température actuelle de la poche de sang.

