


Indicatore di temperatura per sacche di sangue HemoTemp®

HemoTemp® II è una combinazione di indicatore di temperatura irreversibile a cristalli liquidi e termometro reversibile a cristalli liquidi per le sacche di sangue in transito e per la conservazione temporanea al di fuori della banca del sangue.

Un indicatore visivo specializzato che visualizza sia la temperatura attiva che la registrazione permanente della temperatura inaccettabile. Una volta che il fiore blu svanisce con una temperatura di 10°C o superiore, il raffreddamento non lo riporterà indietro.

- La parte reversibile dell'etichetta funge da termometro della sacca di sangue.
- La parte irreversibile, il "fiore", avverte quando la temperatura interna del sangue ha superato i 10°C.

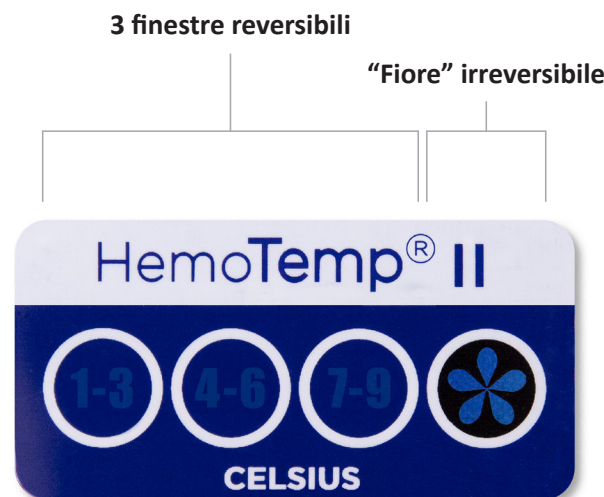

Vantaggi

- Le finestre di indicazione mostrano la progressione della temperatura, fornendo una chiara indicazione delle condizioni
- Il cambiamento del colore del fiore irreversibile segnala se il sangue ha raggiunto una temperatura troppo elevata anche in presenza di un successivo raffreddamento
- Gli indicatori non richiedono la conservazione al freddo, basta attivarli e farli aderire.
- Conformità ai requisiti di qualità e normativi nel rispetto del budget

Specifiche principali

Soglia temperatura	10°C (50°F)
Precisione	±0,5°C
Periodo di conservazione	18 mesi
Condizioni di conservazione	20-30°C

Indicatore di temperatura per sacche di sangue HemoTemp®

Facile da usare, preciso e affidabile

- 1) **Attivare** - Posizionare l'indicatore nell'attivatore per 60 secondi. Rimuovere dall'attivatore e lasciar riposare fino a quando il fiore non inizia a diventare blu: a quel punto è pronto per essere posizionato sulla sacca.



- 2) **Fare aderire alla sacca di sangue** - Rimuovere il supporto da HemoTemp II e premere l'indicatore al centro o vicino al fondo della sacca di sangue refrigerata.



- 3) **Facile da leggere** - Le finestre reversibili mostrano la temperatura attuale della sacca di sangue.

- 4) La finestrella irreversibile del fiore diventa beige/marrone quando la sacca di sangue ha superato i 10°C, indipendentemente dalla temperatura attuale della sacca di sangue.

