


Indicador de temperatura da bolsa de sangue HemoTemp® II

O HemoTemp® II é uma combinação de indicador de temperatura de cristal líquido irreversível e um termômetro de cristal líquido reversível para bolsas de sangue durante o transporte e armazenamento fora do banco de sangue.

Um indicador visual especializado que exibe a temperatura ativa e o registro permanente de temperatura inaceitável. Uma vez que a flor azul se apagar com a temperatura de 10 °C ou superior, o novo resfriamento não a acenderá de volta.

- A parte reversível do rótulo atua como um termômetro para a bolsa de sangue.
- A porção irreversível, a “flor”, avisa quando a temperatura central do sangue excede 10 °C.

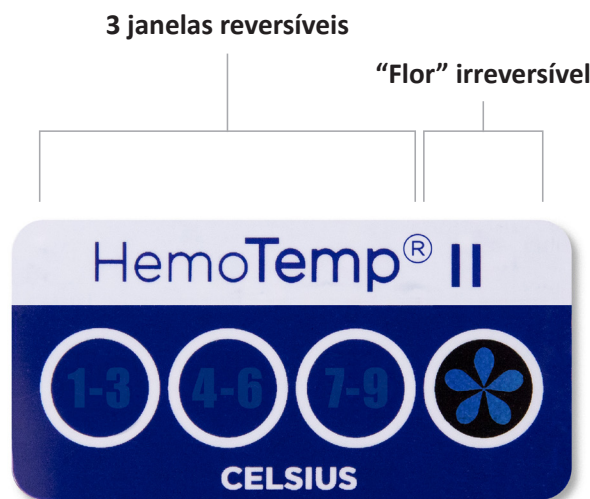

Benefícios

- As janelas indicadoras mostram a progressão da temperatura, dando uma indicação clara da condição
- Sinais irreversíveis de mudança de cor da flor se o sangue estiver muito quente, mesmo que ocorra um novo resfriamento
- Os indicadores não requerem armazenamento refrigerado, basta ativar e aderir
- Alcançar conformidade econômica com requisitos regulatórios e de qualidade

Especificações principais

Limite de temperatura	10 °C (50 °F)
Precisão	±0,5 °C
Validade	18 meses
Condições de armazenamento	20 a 30 °C

Indicador de temperatura da bolsa de sangue HemoTemp® II

Fácil de usar, preciso e confiável

- 1) **Ativar:** coloque no ativador por 60 segundos. Retire do ativador e deixe em repouso até a flor começar a ficar azul. Isso significa que o conteúdo está pronto para ser colocado na bolsa.



- 2) **Aderir à bolsa de sangue:** remova o revestimento protetor do HemoTemp II e pressione o indicador no centro ou próximo ao fundo da bolsa de sangue refrigerada.



- 3) **Leitura facilitada:** as janelas reversíveis mostram a temperatura atual da bolsa de sangue.



- 4) A janela irreversível da flor ficará na cor castanho/marrom quando a bolsa de sangue exceder 10 °C, independentemente da temperatura atual da bolsa de sangue.

