

WarmMark QR - Guía para el destinatario

WarmMark es un sensor de tiempo y temperatura de un solo uso que se ha diseñado para viajar con medicamentos sensibles. WarmMark cambia de blanco a rojo cuando se expone a temperaturas superiores a las aceptables, para indicar a los destinatarios que el envío estuvo demasiado caliente y, por lo tanto, el medicamento no se debe usar. Los expedidores que utilizan WarmMark se preocupan por la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que reciben los pacientes, por eso toman las medidas pertinentes de acuerdo con los requisitos de envío clave.



Escanee el código de WarmMark del envío en cuanto lo reciba.



1. Escanee el código QR del sensor WarmMark.

Image Captured

4. Cuando el recuadro se ponga amarillo, espere 1 segundo para capturar la imagen automáticamente.



2. Haga clic en el botón "Continue" (Continuar) al final de la pantalla para abrir la cámara.

Save Scan

5. Haga clic en "Save Scan" (Guardar escaneo) para comprobar el estado del sensor.



3. Centre el WarmMark dentro del recuadro negro hasta que se vuelva amarillo.




6. Se analizará el estado del WarmMark y se mostrará la temperatura en la última pantalla.

Escaneo inicial de QR



Número de serie e instrucciones de escaneo

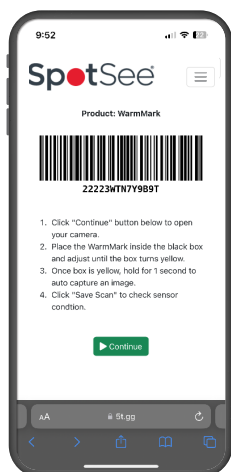

Comprobación del sistema de visión



Información del estado

